



NexxZr⁺ Multi 2.0

Estéticas naturais.
Processo eficiente.

Estéticas naturais.
Processo eficiente.

NexxZr⁺ Multi 2.0



NexxZr⁺ Multi 2.0 é o sucessor do altamente estético NexxZr⁺ Multi com uma formulação melhorada.

NexxZr⁺ Multi 2.0 é uma zircônia multicamadas (4Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) com gradiente natural de cor e translucidez e alta resistência flexural (850 MPa cervical, 650 MPa incisal). Estas propriedades permitem a fabricação de restaurações monolíticas unitárias e pontes altamente estéticas, tanto na região anterior como posterior. O gradiente de translucidez especialmente ajustado garante boa cobertura na área cervical e maior translucidez na área incisal. O gradiente de cores integrado também permite a fabricação eficiente de restaurações de aspecto natural.

Dados Técnicos



Tipo
5Y-TZP (incisal)
4Y-TZP (cervical)



Resistência flexural
650 MPa (incisal)
850 MPa (cervical)



Translucidez
49% (incisal)
45% (cervical)




Indicação
Restaurações unitárias e pontes de 3 elementos



Técnicas de processamento
Técnica de infiltração
Técnica de maquiagem
Técnica cut-back

1 **Gradiente de cor natural** Fabricação eficiente de restaurações de aspecto natural

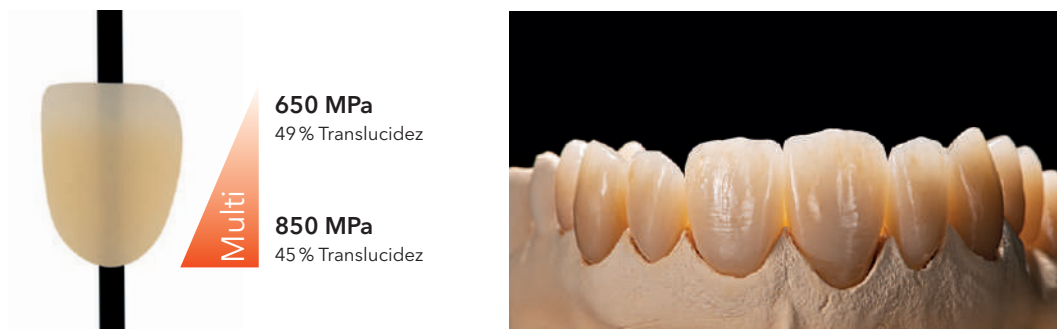

Alta translucidez

Gradiente natural de cor e translucidez

2 **Gradiente de translucidez especialmente ajustado** Boa cobertura na área cervical e maior translucidez na área incisal



Gradiente de translucidez real

Estética realista


Boa cobertura na área cervical

3 **Alta resistência flexural** Restaurações unitárias até pontes de 3 elementos



Possibilidades individuais


Conceito multicamadas

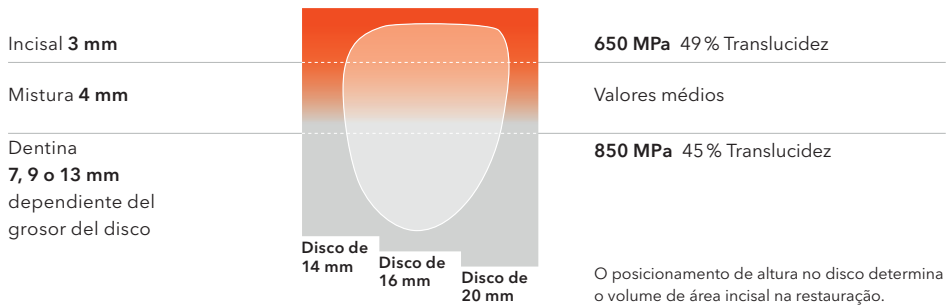

Correspondência de cores



Programa de sinterização

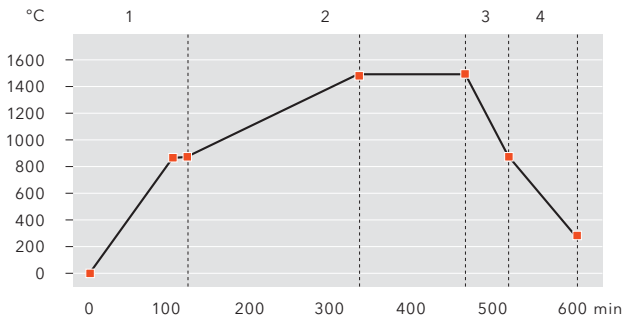

Para informações mais detalhadas, consulte as instruções de uso NexxZr.



sagemax.com/eifu

Formas de apresentação

Geometrias

W-98

Espessuras

14, 16, 20 mm

Cores

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com